

# PAKETE FÜR DIE LIQUORZYTOLOGIE

Hettich Zyto-System: Neues Zubehör

Auch einsetzbar für andere Körperflüssigkeiten wie z.B. Pleuraerguss, Ascites, Feinnadelpunktate etc. bis zu einem Volumen von 0,5 ml.

PAKET CLQ1 \*

PAKET CLQ2 \*

PAKET CLQ3 \*

PAKET CLQ4 \*



\* inklusive

ROTOFIX 32 A

PAKET ALQ1 \*\*

PAKET ALQ2 \*\*

PAKET ALQ3 \*\*

PAKET ALQ4 \*\*


\*\* Pakete ALQ1 - ALQ4 ohne Zentrifuge

12-fach Rotor 1515-A  
mit Deckel mit Bioabdichtung<sup>1)</sup>

12-fach Scheibenrotor 1520

12-fach Rotor 1515-A  
mit Deckel mit Bioabdichtung<sup>1)</sup>

12-fach Scheibenrotor 1520

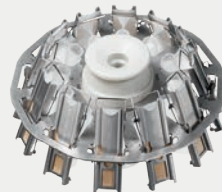

3 x 1524 (12 St.) Spann-Klipps  
1 x 1531 (50 St.) 0,5 ml Einmal-  
Zyto-Kammern mit weißer  
Filterkarte

3 x 1524 (12 St.) Spann-Klipps  
1 x 1531 (50 St.) 0,5 ml Einmal-  
Zyto-Kammern mit weißer  
Filterkarte

3 x 1524 (12 St.) Spann-Klipps  
1 x 1538 (12 St.) 0,5 ml Zyto-  
Kammern (wiederverwendbar)  
1 x 1539 (200 St.) Filterkarten

3 x 1524 (12 St.) Spann-Klipps  
1 x 1538 (12 St.) 0,5 ml Zyto-  
Kammern (wiederverwendbar)  
1 x 1539 (200 St.) Filterkarten



[www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)

**Hettich**

LAB TECHNOLOGY



## EINFACHE UND SCHNELLE VERARBEITUNG VON LIQUORPROBEN\* MIT DEM NEUEN ZYTO-ZUBEHÖR VON HETTICH

Unsere Pakete für die Liquorzytologie bieten alles, was Sie zur Herstellung qualitativ hochwertiger Objektträgerpräparate benötigen. Wählen Sie aus den unterschiedlichen Zubehörkombinationen die für Ihre Anwendung passende.

\* und andere Körperflüssigkeiten wie z.B. Pleuraerguss, Ascites, Feinnadelpunktate etc. bis zu einem Volumen von 0,5 ml.

### SIE HABEN DIE WAHL

- **bei den Rotoren** zwischen einem offenen Scheibenrotor und einem Rotor mit aerosoldicht<sup>1)</sup> schließendem Deckel. Besteht Infektionsgefahr kann letzterer mit geschlossenem Deckel aus der Zentrifuge genommen und die Proben unter dem Abzug weiter verarbeitet werden.
- **bei den Kammern** zwischen Einweg-Zyto-Kammern und wiederverwendbaren Zyto-Kammern. Die Zyto-Kammern haben ein maximales Fassungsvermögen von 0,5 ml.
- **zwischen einem Paket mit und ohne Zentrifuge.** Unsere reinen Zubehörpakete (Bestell-Nr. ALQ1 - ALQ4) enthalten einen Rotor und Kammern Ihrer Wahl, aber keine Zentrifuge. Diese Pakete ermöglichen Hettich-Kunden ihre bereits vorhandenen Zentrifugen zu verwenden. Die beiden neuen 12-fach Rotoren passen in unsere Tischzentrifugen ROTOFIX 32A und UNIVERSAL 320/320R. Die Pakete mit den Bestellnummern CLQ1 - CLQ4 beinhalten zusätzlich die ROTOFIX 32A.

<sup>1)</sup> TÜV-geprüft nach DIN EN 61010, Teil 2-020.

### IHRE VORTEILE

- **Große Auswahl an Zubehör**
- **Einfaches Handling:** Beide Rotoren lassen sich ohne Werkzeug aus der Zentrifuge entnehmen und einsetzen
- **Hoher Probendurchsatz:** 12 Proben pro Lauf.
- **Zubehör mit Bioabdichtung**

### UND SO GEHT'S:

Zur Herstellung von Liquor-Präparaten mit dem neuen Zubehör empfehlen wir folgende Parameterkombination:

RPM: 1.300, das entspricht einer RCF von 185  
Zeit: 6 min  
Volumen: 200 - 500 µl

