



HETTINFO II DOKUMENTATIONSSYSTEM

 Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Blutbanken

HettInfo II dokumentiert wichtige Arbeitsschritte vor und während einer Zentrifugation – das sorgt für Transparenz und nachvollziehbare Prozesse. Das Dokumentationssystem wird über ein Touchdisplay bedient, welches den Anwender Schritt für Schritt bis zur Zentrifugation anleitet und im Hintergrund bedeutsame Prozessdaten aufzeichnet.

Alle dokumentierten Daten werden lokal zwischengespeichert und können direkt nach der Zentrifugation oder zu einem definierten Zeitpunkt als CSV-Datei exportiert werden. Die Daten können sowohl im Netzwerk abgelegt als auch auf einen USB-Stick exportiert werden. Das macht Hettlnfo II systemunabhängig und erleichtert die Weiterverarbeitung.



 Gute Gründe sich für HettInfo II zu entscheiden:

1

Touchdisplay

Über das Touchdisplay lässt sich HettInfo II intuitiv bedienen – selbst mit Laborhandschuhen.

Schritt-für-Schritt Anleitung

2

Durch die Schritt-für-Schritt Anleitung weiß der Anwender jederzeit genau, was als nächstes zu tun ist. Bei falscher Bedienung oder Störung wird sofort eine visuelle und akustische Meldung ausgegeben.

3

Automatischer Datenexport

Gewonnene Daten können nach jedem Lauf oder zyklisch exportiert werden.

4

Universelles Datenformat

Die exportierte CSV-Datei lässt sich leicht weiterverarbeiten und funktioniert systemunabhängig.





DOKUMENTATIONSPROZESS

 Der Prozess von HettInfo II im Überblick



AN ZENTRIFUGATION

Durchführung Zentrifugation aller Scanschritte der Blutbeutel

EXPORT CSV-DATEI

Export auf Server bzw. USB-Stick



WEITER-VERARBEITUNG


Import in eigene Software

HETTINFO II

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

 Alle technischen Eigenschaften von HettInfo II

Kompatibilität	ROTO SILENTA 630 RS, ROTIXA 500 RS	
4,3" Touchdisplay	Anzeige von Prozessdaten- und Prozessstatus, Suche lokaler	
4,3 Touchdisplay	Prozessdaten, Fehlermeldungen, Einstellungen	
Benutzer	max. 3.000	
Datenerfassung Scanmodul	Benutzer-ID, Blutbeutel-ID, Programmnummer	
	Zentrifugennamen, Zentrifugendaten, Datum, Start- und End-Zeit, Temperatur,	
Laufdatenerfassung	Radius, Anlaufzeit, Auslaufzeit, gesamte Laufzeit, RPM, RCF, Integrale RCF,	
	Zyklenzeit, Bremszeit, Bremsabschalt-Drehzahl, Ergebnis	
Dateiformat	CSV	
Anschlüsse	LAN, USB	
Laghuah	Dokumentation von Fehlermeldungen. Export als Textdatei auf	
Logbuch	USB-Stick möglich.	

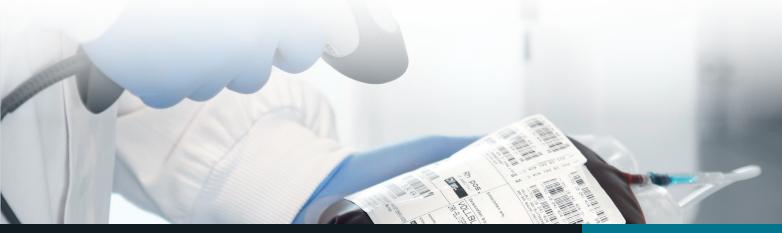

MODULE

HettInfo II

Mit HettInfo II können Sie die Laufdaten Ihrer ROTO SILENTA 630 RS und ROTIXA 500 RS Zentrifuge festhalten.

Um einen kompletten Zentrifugationsprozess zu erfassen, empfehlen wir HettInfo II zuzüglich Scanmodul.



Artikel	Lieferumfang	Bestell-Nr.
HettInfo II – ROTO SILENTA 630 RS	Firmware, Touchdisplay	0955
HettInfo II – ROTIXA 500 RS	Firmware, Touchdisplay	0956

Scanmodul

Mit dem im Scanmodul enthaltenen Barcode-Scanner werden alle Daten zuverlässig erfasst. Die ergonomische Halterung sorgt für eine einfache Handhabung und bietet Schutz bei Nichtgebrauch.

Barcode-Scanner aus der letzten Generation sind kompatibel zu Hettlnfo II und können weiterhin genutzt werden.



Artikel	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Scanmodul - ROTO SILENTA 630 RS	Barcode-Scanner, Halterung, Kabelklammern	0959
Scanmodul – ROTIXA 500 RS	Barcode-Scanner, Halterung, Kabelklammern	0960

Add-on Kit

Mit dem Add-on Kit können ROTO SILENTA 630 RS-Modelle ab Baujahr 01/2008* auf HettInfo II nachgerüstet werden. Um einen kompletten Zentrifugationsprozess zu erfassen, empfehlen wir das Add-on Kit zuzüglich Scanmodul.

^{*} Ältere Modelle auf Anfrage.

Artikel	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Add-on Kit für Modell 5005	Firmware, Touchdisplay, Frontblende	E4378
Add-on Kit für Modell 5005-80	Firmware, Touchdisplay, Frontblende	E4393
Add-on Kit für Modell 5005-90	Firmware, Touchdisplay, Frontblende	E4416
Add-on Kit für Modell 4950	Firmware, Touchdisplay, Frontblende	E4409