

Incubateurs

HettCube 200 | 200 R

Utiliser intelligemment un espace précieux

Écologiques, économiques et élaborés.

Grâce à son volume et ses accessoires polyvalents, le HettCube 200 est parfait pour les applications de l'industrie pharmaceutique, les centres de recherche et les analyses de produits alimentaires.

Le modèle est également disponible en version réfrigérée. La température peut être réglée entre 0 °C et +65 °C (HettCube 200 R).



— Avantages

- Espace utile validé maximal sur surface au sol minimale
- Manipulation à une seule main sans porte vitrée interne
- Ecran tactile de 4,3 pouces avec commande intuitive
- Fermeture automatique de la porte par joints magnétiques, sens d'ouverture de porte facilement modifiable
- Certificat d'usine (HettCert) – donnant la valeur moyenne des 9 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-5
- Les Hettcube non réfrigérés régulent leurs températures à partir de 1°K (1°C) au dessus de la température ambiante
- Pas de ventilateur intérieur
- Conforme IVDR selon le standard DIN 62304

En complément sur les modèles réfrigérés :

- Descente en température avec fonction "vacances"
- Contrôleur de température de classe 3.2
- Pilotage d'appareils externes via le switchboard (option)

— Bénéfices

- Affichage en temps réel : paramètres, programmes à venir, valeurs de consigne/réelle, descente en température, événements
- Calendrier en temps réel
- Paramétrages personnalisables : alarme ouverture de porte, plage de tolérance asymétrique
- 3 scénarios pour panne de courant
- Journal (ouvertures de portes, événements, alarmes et heures de fonctionnement)
- 4 langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol
- Plusieurs possibilités de programmation : démarrage en fonction du temps, de la température, période d'inactivité
- Programmes et réglages températures transférables à d'autres Hettcube sans logiciel supplémentaire
- Intérieur en acier inoxydable 1.4301
- Accessoires spéciaux:
 - Étagères et grille pour la
 - Grille support pour boîtes de Petri
 - Tiroirs télescopiques – différentes profondeurs

— Caractéristiques techniques

	HettCube 200 incubateurs	HettCube 200 R incubateurs réfrigérés
Plage de température incubateurs	1 K au-dessus de la température ambiante jusqu' à +65°C	de 0 °C à +65 °C
Dimensions extérieures (sans poignée ni passage) l x p x h en mm	710 x 825 x 970	710 x 825 x 970
Dimensions intérieures l x p x h en mm	535 x 690 x 420	535 x 690 x 420
Volume intérieur en l	150	150
Volume utile validé en l	82	82
Part du volume intérieur validé dans le volume intérieur	54 %	54 %
Encombrement en m ²	0,6	0,6
Poids en kg	92	103
Nombre d'étagères (fournies)	2 (1 standard + 1 HTS)	2 (1 standard + 1 HTS)
Écart de température dans le temps (+37 °C)	± 0,1 K	± 0,1 K
Écart de température dans l'espace (+37 °C)	± 0,2 K	± 0,2 K
Écart de température dans l'espace (+25 °C)	± 0,1 K	± 0,1 K
Temps de récupération après ouverture de la porte pendant 30 s (+37 °C)	≤ 3 min	≤ 3 min
Consommation électrique (+37 °C)	0,038 kWh/h	0,038 kWh/h
Niveau sonore	≤ 41 dB (A)	≤ 44 dB (A)
Alimentation secteur	220 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	220 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz
Réf.	62000	62005
Version non-lvD	62001	62006
Autres tensions		
100-120 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	62000-01	62005-01



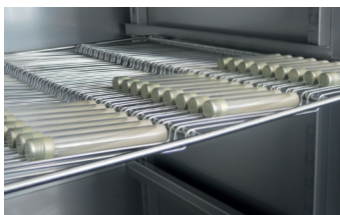
Regardez la vidéo
d'animation
HettCube sur YouTube.



Options et accessoires



Switchboard

Rack pour tubes
Loewenstein

Rack pour boîtes de Petri

	Réf.
Etagère (Kit) Etagère en acier inoxydable, sur rails coulissants standard, charge max. (kg): 50	60001
Etagère (Kit HTS) Etagère en acier inoxydable, avec rails télescopiques, permettant une ouverture à 70 %, charge max. (kg): 40	60031
Tiroir (Kit HTS), hauteur 30 mm Tiroir en acier inoxydable, avec rails télescopiques, permettant une ouverture à 70 %, charge max. (kg): 40	60024
Tiroir (Kit HTS), hauteur 65 mm Tiroir en acier inoxydable, avec rails télescopiques, permettant une ouverture à 70 %, charge max. (kg): 40	60025
Tiroir (Kit HTS), hauteur 105 mm Tiroir en acier inoxydable, avec rails télescopiques, permettant une ouverture à 70 %, charge max. (kg): 40	60026
Rack (Kit HTS) Support en acier inoxydable pour 90 boîtes de Petri (diam. 90 mm), avec rails télescopiques, ouverture à 70 %	60038
Rack (Kit standard) Support en acier inoxydable pour 90 boîtes de Petri (diam. 90 mm), avec rails coulissants standard	60039
Rack Support en acier inoxydable pour 90 boîtes de Petri (diam. 90 mm)	60040
Rack (Kit HTS) Support en acier inoxydable avec inclinaison 5° pour 81 tubes Loewenstein, avec rails télescopiques, ouverture à 70 %, pour tubes diam. 15-20 mm	60036
Rack (Kit standard) Support en acier inoxydable avec inclinaison 5° pour 81 tubes Loewenstein, avec rails coulissants standard, pour tubes diam. 15-20 mm	60037
Rack Support en acier inoxydable avec inclinaison 5° pour 81 tubes Loewenstein, pour tubes diam. 15-20 mm	60041
Rack L, 16-place Racks Loewenstein en acier inoxydable pour 16 tubes 100 - 125 mm, diamètre 15-20 mm, angles d'inclinaison 5° et 20°	60027
Rack XL, 16-place Racks Loewenstein en acier inoxydable pour 16 tubes 126 - 170 mm, diamètre 15-20 mm, angles d'inclinaison 5° et 20°	60028
Switchboard Bloc 4 prises électriques externes pilotables, livré avec un câble passage paroi	60521
Sonde de température PT 100 indépendante Pour mesure indépendante de la température, sonde 4 fils, connexion 4 contacts à l'arrière de l'appareil	60503
Déshumidification passive Pour l'ouverture individuelle ou programmée d'un module de déshumidification via l'écran tactile.	60042
Service: Installation du kit de superposition pour HettCube 200 200 R	60043
Service: Changement du sens d'ouverture de porte	60044
Porte vitrée Porte entièrement vitrée pour HettCube 200 200 R	60030
Porte vitrée Porte entièrement vitrée pour HettCube 400 400 R	60029
Porte vitrée Porte entièrement vitrée pour HettCube 600 600 R	60013
Passage de câble Diam. 22 mm, avec bouchon en mousse isolante	60006
Passage de câble Diam. 42 mm, avec bouchon en mousse isolante	60007
Passage de câble Diam. 67 mm, avec bouchon en mousse isolante	60008
Kit de superposition Pour superposer en toute sécurité 2 incubateurs HettCube 200 200 R	60009
Meuble à roulettes Meuble sur roulettes (2 auto-bloquantes) avec 2 tiroirs, L x P x H (mm) : 770 x 800 x 550, pour HettCube 200 200 R	60010
Verrouillage du port USB (kit) Pour sécuriser l'interface USB. Contient une clé USB et 10 bouchons cadenas.	60525
Paramètre pour un fonctionnement en refroidissement continu Pour une incubation à une température inférieure à 15°C pendant plus de deux semaines	60526

— Équipements de série

Écran tactile de 4,3 pouces :

- Affichage de l'état réel / de l'état visé
- Précision de réglage à 0,1 °C
- Calendrier en temps réel
- Minuterie
- Options langues (anglais, allemand, français et espagnol)
- Diagramme de température dans 3 niveaux d'agrandissement (jusqu'à 4 semaines)
- Scénarios pour panne de courant
- Alarme de porte réglable individuellement
- Journal (ouvertures de la porte, processus, alarmes et heures de service)
- Protection par code PIN
- Jusqu'à 99 fonctions de programmation (démarrage/arrêt, intervalle de temps, minuterie au démarrage, minuterie à la température, ...)
- Contrôleur de température classe 3.2 sur tous les appareils réfrigérés

De plus avec les appareils réfrigérés:

- Programmation hebdomadaire avec fonction Jours fériés
- Contrôleur de température classe 3.1 sur tous les appareils
- Programmation des appareils externes via Switchboard (option)

Verrouillage simultané du panneau de commande et de la porte

Interface USB pour la maintenance

Passage de câble à l'arrière Ø 42 mm

Sortie alarme sans potentiel

Espace intérieur en acier inoxydable (W-St 1.4301 (ASTM 304))

Et vous obtenez en plus gratuitement...

2 étagères standards en acier inoxydable

1 étagère à rails télescopiques HTS

Certificat d'usine (HettCert) – donnant la valeur moyenne des 9 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-05

Décompte des étagères standards dont vous n'avez pas besoin*

* Si vous choisissez des étagères ou tiroirs différents de ceux livrés en série,

— Certifications / Enregistrements

Certification des produits :



Enregistrement des produits :



Certifications des entreprises :



■ Dimensions

